




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTER

DEUTSCH (DE)

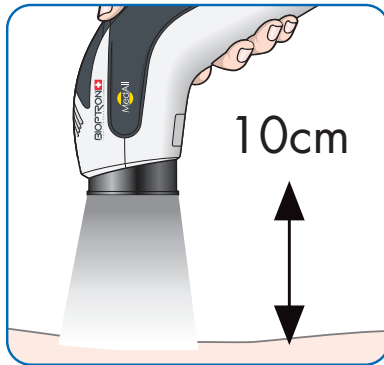

1



2



3



4

WIE BENUTZE ICH DAS ZUBEHÖR?

Positionieren Sie das BIOPTRON Gerät mit dem gewünschten Filter in einem Abstand von 10 cm zur behandelnden Fläche. Wenn Flächen welche grösser als der Filterdurchmesser sind behandelt werden sollen, behandeln sie eine Fläche nach der anderen mit der empfohlenen Behandlungsdauer.

WIE WIRD DER FILTER GEWECHSELT?

Nehmen Sie den auszutauschenden Filter (Bild 2) vorsichtig und ohne Kraftaufwand heraus und setzen Sie den gewünschten Farbfilter wie in Bild 3 gezeigt ein. Halten Sie den äußeren Ring des Filters und nicht die Linse.

WIE WIRD DER FILTER GEREINIGT? (Bild 4)

1. Entfernen Sie den Filter vom Gerät, indem Sie den Filter am Außenring festhalten.
2. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes, fusselfreies Tuch, um Kratzer auf der Glasoberfläche zu vermeiden.
3. Trocknen Sie den Filter mit einem anderen fusselfreien Tuch.

GARANTIE

- 5 Jahre bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Einhaltung der Warnhinweise
- Diese Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab
- Diese Garantie deckt keine ästhetischen Änderungen ab, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, der die Produktleistung nicht beeinträchtigt, oder auf Schäden, die durch Produktmissbrauch verursacht wurden.

WARNUNGEN

1. Verwenden Sie keine Chemikalien (z. B. Isopropylalkohol), um die Innen- oder Außenseite der Glasoberfläche und des Filterrings zu reinigen.
2. Bewahren Sie den Filter in einem Schutzbeutel auf, um Staubansammlungen und Verfärbungen durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
3. Der Filter besteht aus zerbrechlichem Glas und muss daher vorsichtig behandelt werden!
4. Die Filterlinse darf vom Benutzer nicht entfernt werden.



PMD-ME145-22-DE
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

DEUTSCH (DE)