




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

필터

한국어

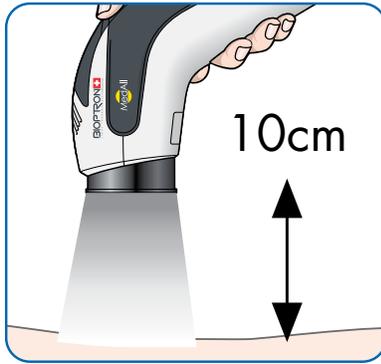

1



2



3



4

사용법

원하는 필터를 부착한 BIOPTRON 장치를 치료할 부위(그림 1)를 포함하도록 맞춘 상태에서 10CM 떨어트려 배치합니다. 해당 컬러 필터의 직경보다 큰 부위를 치료할 경우, 권장 시간에 따라 한 부위씩 치료합니다.

필터 교체 방법

교체할 필터(그림 2)를 힘들이지 않고 조심스럽게 빼낸 다음, 그림 3과 같이 원하는 컬러 필터를 삽입합니다.
이때 렌즈가 아닌 필터의 외부 링을 잡습니다.

필터 세척 방법 (그림 4)

1. 필터의 외부 링을 잡고 장치에서 필터를 빼냅니다.
2. 유리 표면이 긁히지 않도록 물에 적신 부드러운 보풀이 일지 않는 천을 사용합니다.
3. 보풀이 일지 않는 다른 천으로 필터의 물기를 닦아냅니다.

보증

- 용도대로 사용하고 경고를 준수한 경우 5년 보증이 제공됩니다.
- 이 보증은 재료 및 제조 결함에 적용됩니다.
- 이 보증은 제품 성능에 영향을 미치지 않는 일상적인 마모로 인한 미관상의 변화 또는 제품 오용으로 인한 손상에는 적용되지 않습니다.

경고

1. 유리 표면과 필터 링의 내부 또는 외부를 청소할 때 화학 물질(예: 이소프로필 알코올)을 사용하지 마십시오.
2. 먼지가 쌓이거나 햇빛에 노출되어 변색되는 것을 방지하기 위해 필터를 보호용 파우치에 넣어 보관하십시오.
3. 필터는 깨지기 쉬운 유리로 만들어져 있으므로 조심해서 다루어야 합니다!
4. 사용자는 필터 렌즈를 제거할 수 없습니다.



PMD-ME145-22-EN
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

한국어